

Spectrum Cartridge Quick-System

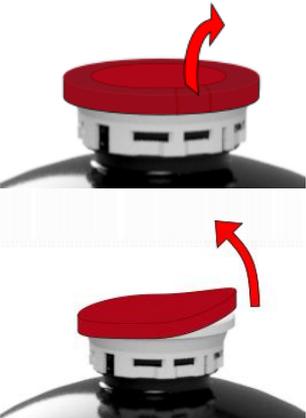


Spectrum Pure Cartridge



Spectrum UltraPure Cartridge

Gelöstes Salz im Zufluss lässt das Ionenaustauscherharz in den **Spectrum Cartridge** erschöpfen. Die Leitfähigkeit erhöht sich und die geforderten Grenzwerte können nicht mehr eingehalten werden. Wenn auf dem Display Warnungen bezüglich einer Überhöhten Leitfähigkeit angezeigt werden, sollte der entsprechende **Spectrum Cartridge** gewechselt werden. Nach dem Wechsel des Harzbehälters empfiehlt es sich die Anlage für ca. 15 Minuten zu spülen.

<p>Verschlusshebel öffnen und danach Druck ablassen. Behälter unter den Entlüftungsschlauch halten.</p>	<p>Anschluss von dem Behälter herunterziehen</p>	<p>Behälter durch neuen Ersetzen. Schutzfolie an der Perforierten Stelle aufreißen und Schutzkappe entfernen</p>
		
<p>Anschluss bis zum Anschlag auf den Behälter aufschieben</p>	<p>Verschlusshebel wieder schließen</p>	<p>Den Behälter entlüften und Spülen! (siehe unten)</p>
		

Entlüften

Zum Entlüften muss das Gerät Betriebsbereit und Eingeschaltet sein!

Zum Entlüften der beiden **Spectrum Cartridge** alle Entnahme und Spülventile schließen und warten bis mindestens 1,5bar Druck am Manometer angezeigt wird.

Dann den Verschlusshebel öffnen und zum Entlüften den roten Entlüftungsknopf betätigen. Danach den Verschlusshebel wieder schließen.

Den Vorgang gegebenenfalls wiederholen, bis der Behälter vollständig entlüftet ist.

Verschlusshebel öffnen, danach den Entlüftungsknopf solange drücken bis keine Luft mehr ausströmt



Verschlusshebel wieder schließen. Sollte noch Luft in dem Harzbehälter sein, sollte der Vorgang wiederholt werden



Spülen nach dem wechseln des **Spectrum Cartridge**:

Nach dem Wechsel der **Spectrum Cartridge** empfiehlt es sich die Anlage zu spülen. Dazu das „Rinse Valve“ für 15Minuten komplett öffnen.

Nach dem Spülvorgang muss das „Rinse Valve“ wieder geschlossen werden. Die Anlage ist jetzt wieder Betriebsbereit.

Entsorgung

Das Wasser im verbrauchten *Spectrum Cartridge* kann z.B. in ein Waschbecken entleert werden



Entsorgung gemäß den nationalen Vorschriften

Sicherheitshinweis

Materialsicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich



Warning!

Content causes serious eye irritation

Prevention

Wash thoroughly after handling

Wear eye protection/face protection

Response

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

If eye irritation persists: Get medical advice/attention